

I. 暫間齒牙固定術 (2)


1) Wirelig ture

재 료 :


- 1. Dead soft stainless steel wire, 0.010inch
- 2. Dead soft stainless steel wire, 0.007inch
- 3. Hemostat or beaked-nose pliers
- 4. Amalgam plugger 5. Scissors.

술 식 :


- 1. 0.010inch wire를 고정시킬 치아주위에 구부린다(그림 1).
- 2. wire를 cingulum 上方에 오도록 적합시키고 한 쪽 끝을 twist한다(그림 1).
- 3. 0.007inch wire를 $1\frac{1}{2}$ inch 길이로 자르고 hairpin 모양으로 구부린다. 이 때 wire의 한 쪽 길이가 다른 측보다 더 길게 한다. (그림 2)
- 4. hairpin 모양의 wire를 舌側에서 insert한다. 이 때, 더 긴 側을 치경부로 향하게 하고 짧은 側을 절단면 측으로 향하게 한다. (그림 2)
- 5. 각각의 hairpin wire를 Hemostat 로 잡아서 팽팽하게 당기면서 twist한다.
- 6. 각각의 twist end를 3~4mm 남겨 두고 나머지는 자른다.
- 7. 그 다음 amalgam plugger를 가지고 twisted end를 齒間으로 밀어 넣는다. (그림 3)
- 8. wire를 고정시키는 방법에는 다음의 여러가지 변형을 들 수 있다.
 - a) incisal movement 방지(그림 4)
 - b) cervical movement 방지(그림 5)
 - c) 치아의 離開部(그림 6).

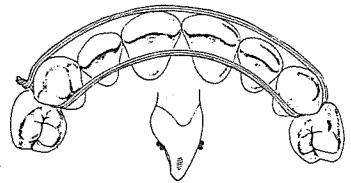


(그림 1)

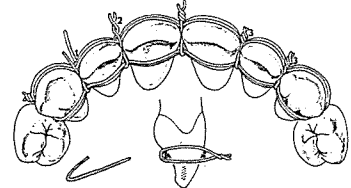


(그림 2)

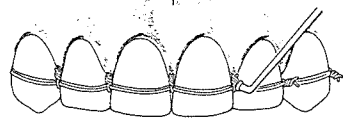

(그림 3)

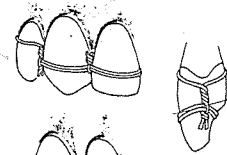

(그림 4)

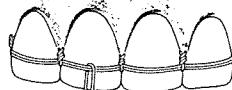

(그림 5)



(그림 6)

선화치과기공소

대표 李 禹 成

서울 중구 남대문로 5가 6-10

☎ 23-1662

